

B5T-007001
USBドライバインストール説明書
(Windows 10用)

1. はじめに
2. 準備物
3. インストール手順
 1. パソコンへの接続
 2. COMポートの確認
4. インストール失敗の対応

- 本書ではB5T-007001のUSBドライバインストール手順について説明します。
- 本アプリは以下の環境で動作を確認しています。

OS Windows 10 Pro 32bit / 64bit

CPU Intel® Core™ i7-3770MQ CPU @ 3.40GHz

Windows, Windows10 は 米国Microsoft社の米国およびその他の国における登録商標です。
Intel, Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
その他、記載されている製品名は各社の商標または登録商標です。


2. 準備物

- B5T-007001(HVC-P2)
- パソコン(OS: Windows 10)
 - ※インストール操作を行うには、管理者権限が必要です。
管理者アカウントでコンピュータにログインし操作を行うことを推奨します。
- USB2.0 microUSBケーブル
 - ※充電専用ケーブルでは動作しません。

3. インストール手順（パソコンへの接続①）


- B5T-007001をパソコンに接続してください。
- 自動でドライバソフトウェアのインストールが開始されます。

※インストール中は下図の赤い丸部分にアイコンが表示されます。

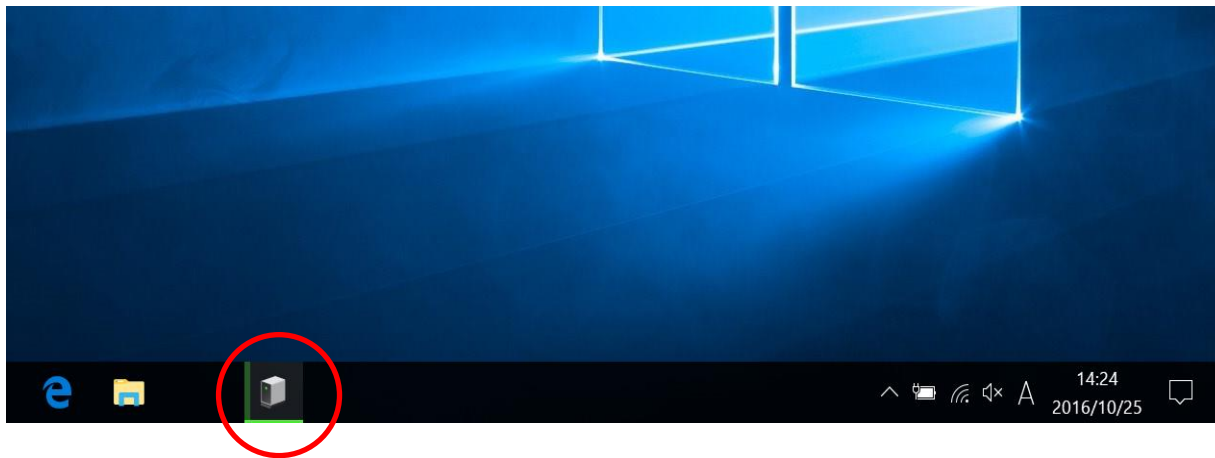


3. インストール手順（パソコンへの接続②）

- ダイアログが表示されるので、終了するまで待機してください。
- ダイアログが消えるとインストール完了です。

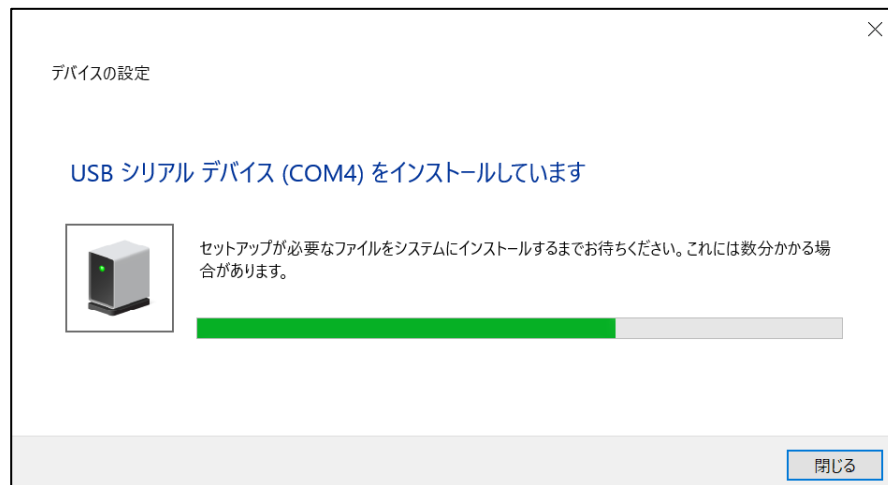

3. インストール手順 (COMポートの確認①) **OMRON**

- デバイスマネージャーから「ポート」欄に“USBシリアルデバイス”が追加されていることを確認してください。

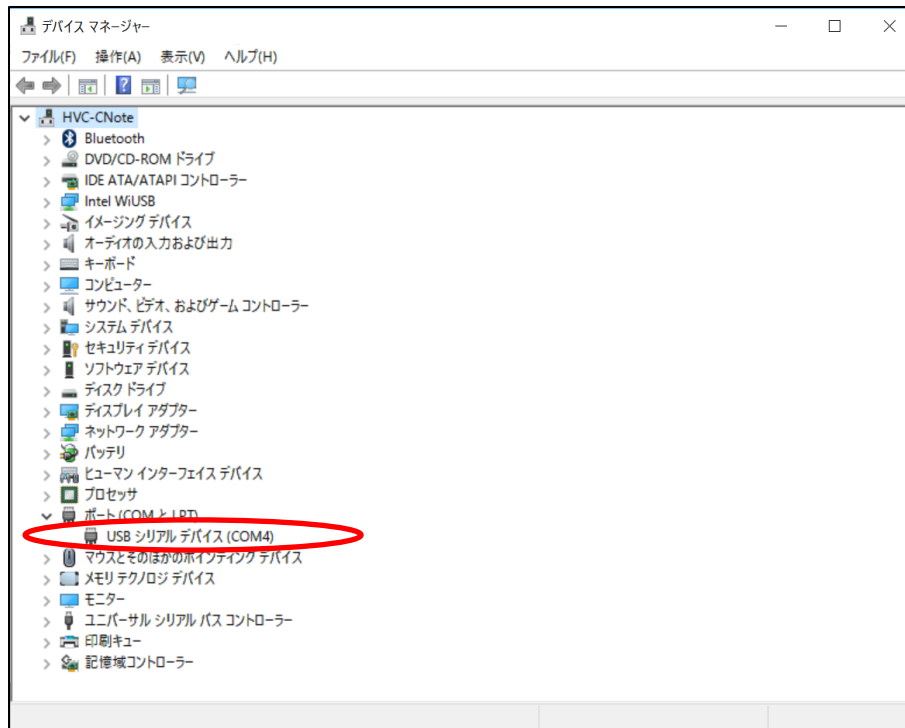



3. インストール手順（COMポートの確認②）

- デバイスマネージャからCOMポートのプロパティを確認してください。
- 「このデバイスは正常に動作しています。」が表示されましたら、インストール成功です。





4. インストール失敗の対応

- USBドライバを下記からダウンロードしてください。
ダウンロード先:<https://plus-sensing.omron.com/product/B5T-007001/>
- デバイスマネージャーから「ほかのデバイス」の欄に“OMRON HVC-P2”があることを確認してください。（左図）
- 右クリックで“ドライバーソフトウェア”の更新を選択してください。（右図）

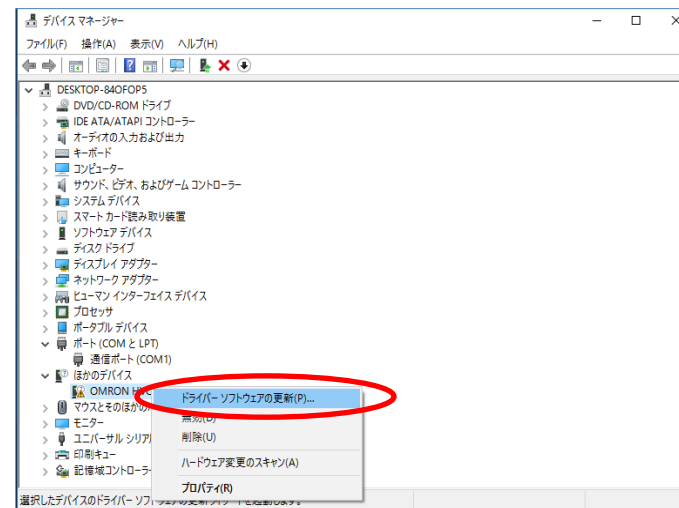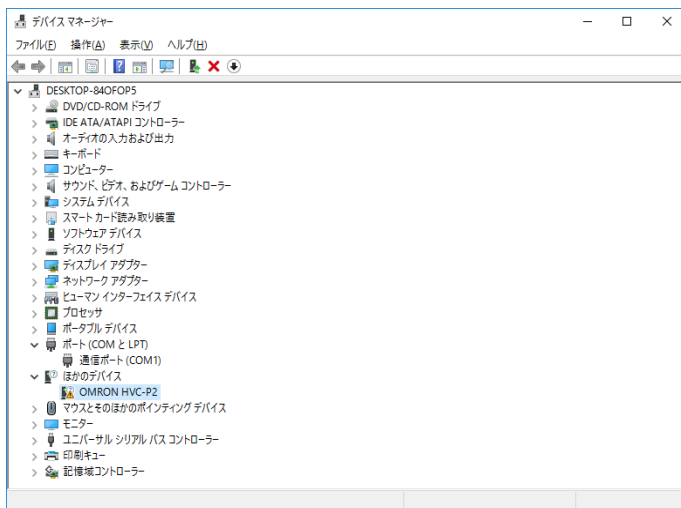


4. インストール失敗の対応

- 「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択してください。（左図）
- ダウンロードしたドライバが保存されているフォルダ（OMRON_inf）を選択してください。（右図）

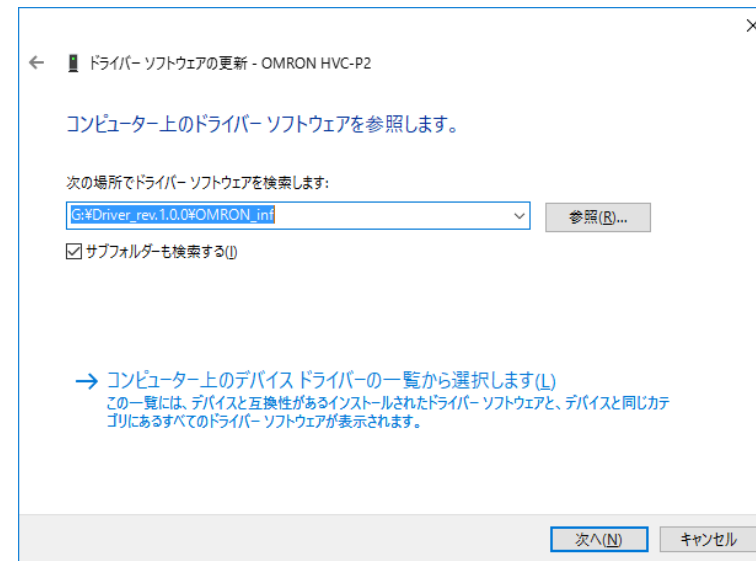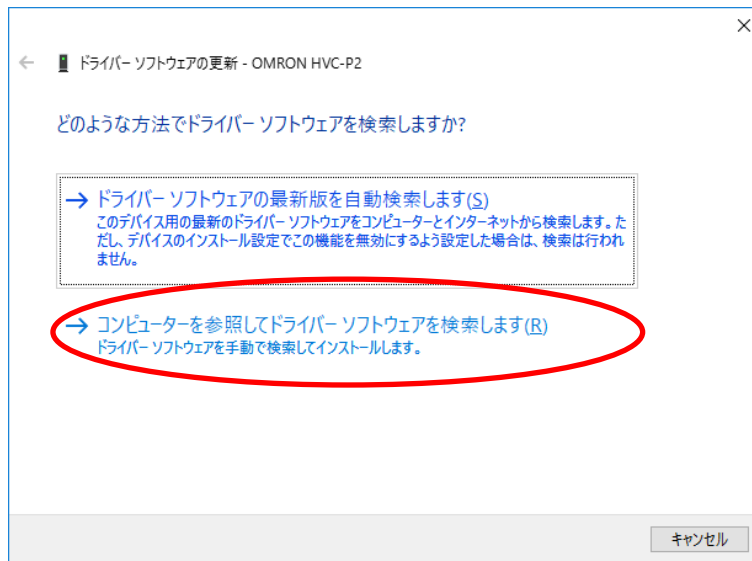

4. インストール失敗の対応

- 「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」と表示されましたら、インストール完了です。

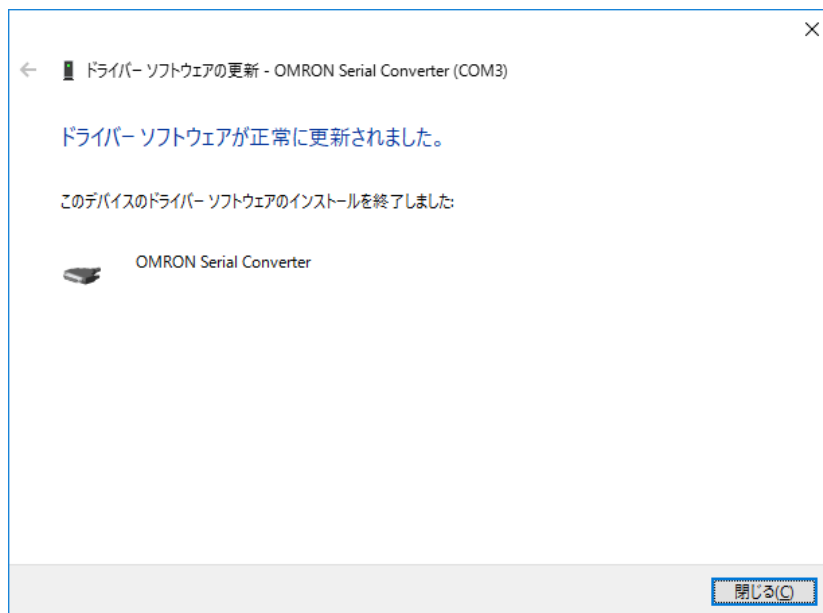

日付	Rev	内容	作成	照査	認可
2016/11/29	A	First release	小島	真鍋	山田